


 **askona**
PERFORMANCE

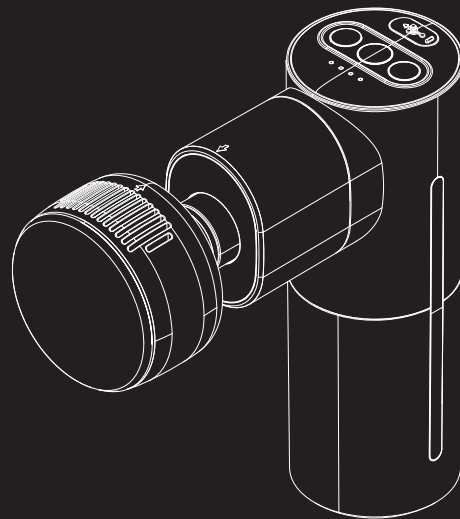

Устройство для холодного и горячего массажа

**Массажер для тела
Power Body**

Руководство по эксплуатации


Эксперт по улучшению здоровья семьи с помощью упражнений
Благодарим Вас за покупку наших продуктов. Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации перед применением продукта, чтобы гарантировать его правильную работу.
Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в качестве справочного материала в будущем.

Краткое описание и назначение массажера

Портативное устройство для холодного и горячего массажа - это устройство для глубокого расслабления мышечной фасции, подходящее для физиотерапевтического массажа после выполнения упражнений и занятий фитнесом. Оно позволяет уменьшить скованность движений и боль в мышцах, снять мышечную усталость и усилить кровообращение с целью оздоровления мягких тканей организма.

Назначение

Подходит для физиотерапевтического массажа и ухода за кожей до/после тренировки и фитнеса.

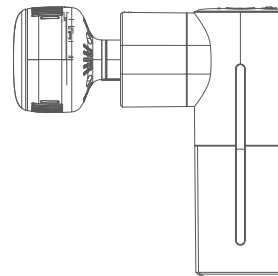

**Устройство для холодного и горячего массажа –
Ваш эксперт в области здоровья**

Важная информация

Чтобы уменьшить опасность, включая неисправность, поражение электрическим током, травмы, возгорание, смерть и повреждение устройства, перед использованием продукта внимательно прочтите все инструкции, предупреждения и напоминания, приведенные в данном руководстве по эксплуатации.

1. Запрещено

01. Несовершеннолетним запрещено использовать продукт. Продукт запрещено использовать людям, получившим травму. Перед применением при болях в мышцах проконсультируйтесь с врачом.
02. Продукт нельзя использовать на влажной или грязной коже. В этом случае используйте его в одежде, осторожно нажимая и перемещая по коже, каждое положение в течение примерно 60 секунд.
03. Не погружайте изделие в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционное отверстие изделия.
04. Не кладите никакие предметы на вентиляционное отверстие изделия.
05. Не ставьте продукт в огонь или близко к источнику огня.
06. Не роняйте изделие намеренно.
07. Ни в коем случае не изменяйте и не модифицируйте продукт.
08. Не используйте и не заряжайте продукт без контроля.
09. Не приближайте пальцы, волосы или другие части тела к оси и задней поверхности массажной головки, чтобы избежать их защемления.
10. Детям младше восьми лет запрещено использовать продукт. Детям запрещено использовать, чистить и обслуживать продукт без присмотра взрослых.
11. Поскольку поверхность устройства выделяет тепло, люди, не чувствительные к теплу, должны использовать продукт с осторожностью.



Изображение: не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления пальцев, при запуске устройства без массажной головки.



Изображение: не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления пальцев, когда устройство оборудовано массажной головкой.

2. Положения по безопасности

Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, если Вы относитесь к следующим группам лиц.

01. Беременные женщины и онкологические больные.
02. Лица, страдающие от сердечных заболеваний, пациенты с установленными кардиостимулятором или дефибриллятором.
03. Лица, проходящие оперативное лечение.
04. Лица, страдающие от артериальной аневризмы, кровотечения, принимающие антикоагулянты
05. Лица с нарушениями в деликатных зонах, включая голову или суставы.
06. Осложнения, вызванные другими заболеваниями (например, невралгия и др.).

3. Меры предосторожности при использовании

01. После полной зарядки батареи необходимо вынуть зарядное устройство.
02. Не используйте продукт во время зарядки.
03. Правильно используйте продукт в соответствии с руководством по эксплуатации.

I. Общие сведения о продукте

Благодарим Вас за приобретение портативного устройства для холодного и горячего массажа.

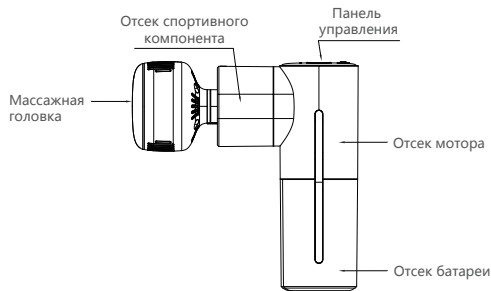


Схема конструкции изделия

Массажная головка



Головка для холодного и горячего массажа
используется для расслабления всего тела коррекции формы и ухода за кожей



Цилиндрическая головка
используется для воздействия на глубокие слои кожи



Шаровидная головка
используется для крупных мышечных групп




Плоская головка
используется для широчайшей мышцы спины и трапециевидной мышцы



П-образная головка
используется для шеи и обеих сторон позвоночника

II. Метод применения

Принцип работы

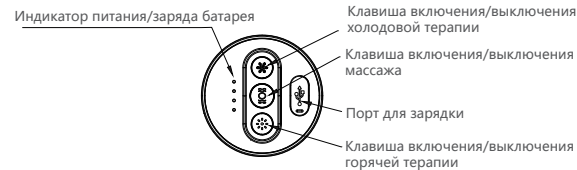

Изображение положения клавиш включения/выключения

1. Когда устройство выключено, и любая функциональная клавиша нажата кратко, индикаторы заряда батареи показывают текущий заряд батареи. Устройство не запускается.
2. Когда устройство выключено: при длительном нажатии кнопки постукивания и вибрации в течение трех секунд, функция постукивания включается при низкой интенсивности, а индикатор становится синим. После однократного краткого нажатия кнопки интенсивность становится средней, а индикатор становится фиолетовым. При повторном кратком нажатии кнопки интенсивность повышается, а индикатор становится красным. Третье короткое нажатие приводит к отключению функции. При такой смене режимов нажмите и удерживайте кнопку постукивания в течение трех секунд для выключения.
3. Когда устройство выключено: если нажать и удерживать кнопку включения/выключения термотерапии в течение трех секунд, функция прогрева запускается примерно при 35°C, а индикатор становится синим. После однократного краткого нажатия температура повысится примерно до 40°C, и индикатор станет фиолетовым. После второго краткого нажатия температура повысится примерно до 45°C, и индикатор станет красным. Третье короткое нажатие приведет к выключению функции. При такой смене режимов нажмите и удерживайте кнопку термотерапии в течение трех секунд, чтобы выключить ее.
4. Когда устройство выключено: при длительном нажатии кнопки включения/выключения холодной терапии в течение трех секунд

функция холодной терапии запускается при температуре около 10°C, а индикатор становится синим. После однократного краткого нажатия температура становится примерно 15°C, а индикатор становится фиолетовым. После второго секундного нажатия температура изменится до 20°C, и индикатор станет красным. Третье краткое нажатие приведет к выключению функции. При такой смене режимов кнопка холодной терапии удерживается в течение трех секунд для выключения.

5. Когда устройство включено, при кратком нажатии любой функциональной клавиши будет запущена соответствующая функция.

6. Когда функции полностью отключены, индикатор будет постоянно отображать уровень заряда батареи в течение пяти 7 секунд, и устройство будет находиться в режиме ожидания. Устройство можно запустить кратким нажатием любой функциональной клавиши. Устройство автоматически выключится при простое в течение пяти секунд.

7. Для функции термотерапии или функции холодной терапии, описанных выше, необходимо установить головку для холодного и горячего массажа, так как другие массажные головки не поддерживают эти функции.

8. Функции вибрации, термотерапии и холодной терапии могут работать независимо.

9. Для функций вибрации, термотерапии и холодной терапии автоматическая синхронизация составляет 15 минут.

Массажная головка в сборе



Головка горячего и холодного массажа



Шаровидная головка



Цилиндрическая головка



Плоская головка




П-образная головка

Примечание: желтая сплошная линия на рисунке — это линия выравнивания продукта, в реальных продуктах она ярко-черная.

Установка массажной головки:

1. Разборка и сборка массажной головки производится съемным способом, без завинчивания;
2. Зафиксируйте красную вертикальную отметку головки холодного и горячего массажа на выемке поршня;
3. Убедитесь, что она вставлена снизу.


Инструкции по установке головки холодного и горячего массажа

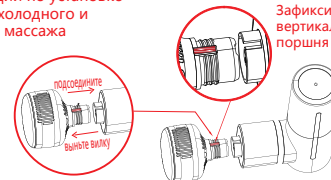

Зафиксировать красную вертикальную отметку на выемке поршня

Зарядка

Порт зарядки расположен в верхней части ручки продукта.

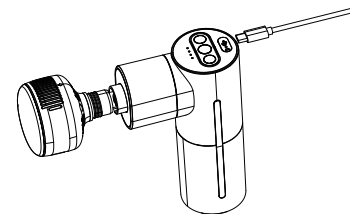

01. Перед первым использованием зарядка до полностью заряженного состояния составляет примерно 5 часов.
02. Заряжаемые батареи предполагают специальный разъем TYPE-C для подключения USB-кабеля, а другой конец оснащен любым адаптером зарядного устройства на 5 вольт (рекомендуется 5В и 2А).

03. Все индикаторы заряда батареи на приборе регулярно мигают во время зарядки.
04. Если все индикаторы заряда батареи на приборе перестают мигать и продолжают гореть, это свидетельствует о полной зарядке.
05. Батарею можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда при определенных условиях окружающей среды.
06. Заряжайте своевременно, если заряд ниже 25%.
07. Не рекомендуется полностью разряжать батарею до 25%.
08. Среднее время работы составляет три часа после зарядки устройства, в зависимости от частоты вибрации и приложенного давления во время применения.

III. Основные параметры

Наименование продукта: Массажер для тела Power Body	Модель продукта: HXR-B025
Вес нетто продукта: 620 г	Входное напряжение: 5В, 2А
Мощность: 25 Вт (до 35 Вт)	Характеристики батареи: 11,1В 2400 мАч
Уровень мощности: 3 уровня, доступные для регулировки	Время зарядки: около 5 час.
Условия эксплуатации: 0-40°C	Размер основного устройства: 140×60×150 мм
Срок службы батареи: 2-3 часа в режиме постукивания 2-3 часа в режиме холод. терапии 3-4 часа в режиме термотерапии	Самосинхронизация: Режим постукивания ≈ 15 мин. Холодовой массаж ≈ 15 мин. Термотерапия ≈ 15 мин.
Значение температуры: Прогрев: 35°C для Уровня-1, 40°C для Уровня-2, 45°C для Уровня-3 Охлаждение: 20°C для Уровня-1, 15°C для Уровня-2, 10°C для Уровня-3. Приведенные выше значения могут отличаться на плюс или минус 5°C, в зависимости от окружающей среды и условий эксплуатации.	

IV. Общие проблемы

Устройство не запускается

1. Если температура рабочей среды массажного пистолета превышает 40°C, в массажном пистолете может сработать защита от перегрева, и аппарат не будет запускаться в обычном режиме. **Решение:** Оставьте его при температуре ниже 40°C в течение 2 часов, а затем запустите.

2. Уровень заряда батареи равен «0».

Батарея разряжена, если пользователь не заряжает устройство в течение длительного времени, батарея будет обеспечивать защиту от низкого уровня зарядки, называемую защитой от чрезмерной разрядки. В этом случае массажный пистолет не будет работать нормально при повторном включении. **Решение:** Оставьте прибор выключенным, подключите зарядное устройство и переведите массажный пистолет в режим зарядки. Отключите зарядное устройство, когда устройство полностью зарядится. В это время активируйте кнопку включения/выключения, чтобы массажный пистолет мог нормально работать.

Если зарядить устройство не удается

1. Превышение температуры массажного пистолета. В случае превышения температуры в основном корпусе массажного пистолета зарядка невозможна, даже если имеется доступ к зарядному устройству. **Решение:** Оставьте его при температуре ниже 40°C в течение 2 часов, а затем снова попробуйте зарядить устройство.

2. Перегрев зарядного устройства. Когда температура рабочей среды массажного пистолета превышает 40°C, в зарядном устройстве может сработать защита от перегрева, и это свидетельствует о том, что основное устройство не может нормально заряжаться. **Решение:** Оставьте его при температуре ниже 40°C в течение 2 часов, а затем снова попробуйте зарядить устройство.

Устранение неполадок массажного пистолета	
Описание неполадки	Устранение неисправности
1. Массажная головка соскользнула и упала.	Проверьте, установлена ли массажная головка на место (см. Руководство по конкретным операциям).
2. Изделие не включается.	Проверьте, достаточно ли электроэнергии (заряжайте более 5 часов, если оно не используется в течение длительного времени).
3. Изделие не заряжается.	Проверьте, вставлен ли порт зарядки правильно.
4. Внезапная остановка после непрерывной работы в течение 10 минут.	Это явление связано с настройкой функции защиты от долгой работы, переключение из рабочего режима в режим ожидания. Перезапуск возможен коротким нажатием кнопки, и это нормальное явление (см. Руководство по конкретным операциям).
5. Функция постукивания останавливается после блокировки ротора массажной головки.	Это явление представляет собой настройку функции защиты от неправильной работы, переключение с рабочего режима в режим ожидания. Перезапуск возможен коротким нажатием кнопки, и это нормальное явление (см. Руководство для конкретных операций).

V. Утилизация

По истечении срока службы продукта не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Вы должны поместить продукт в корзину для переработки, назначенную правительством. Продукт можно также отправить обратно в центр послепродажного обслуживания завода-изготовителя, и персонал сервисного центра утилизирует его экологически безопасным способом.

1. Техническое обслуживание, чистка, хранение и транспортировка

01. Очищайте устройство слегка влажным полотенцем, протирайте и просушивайте сухой мягкой тканью.
02. Храните устройство в упаковочной коробке, если оно не используется длительное время.
03. Заряжайте устройство не реже одного раза в месяц, если оно не используется долгое время.
04. Массажное устройство следует хранить на складе с хорошей вентиляцией и без агрессивных газов, на расстоянии 250 мм от земли.
05. Не превышайте количество в 5 слоев при укладке массажных устройств.
06. Очистите массажное устройство перед упаковкой и хранением, если оно не используется в течение длительного времени. Рекомендуется вынимать его для зарядки хотя бы раз в месяц, чтобы не допустить воздействия влаги.
07. Продукт подходит для транспортных средств, включая автомобили, поезда, корабли и самолеты.
08. Продукт должен быть закреплено в процессе транспортировки, чтобы предотвратить резкие колебания, столкновения, перекатывание и падение. Его следует размещать сверху, обращаться с ним осторожно и беречь от дождя.



POWER EYES
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ



POWER NECK
МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ



MUSCLE SHOCK FOOT
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



MUSCLE SHOCK BODY
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА



STRESS FREE
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА



POWER BACK
МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ



POWER MOOD
МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ



POWER FOOT
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ